


FI-1337


4-punts Doublepad Heupgordel Large

Instructies

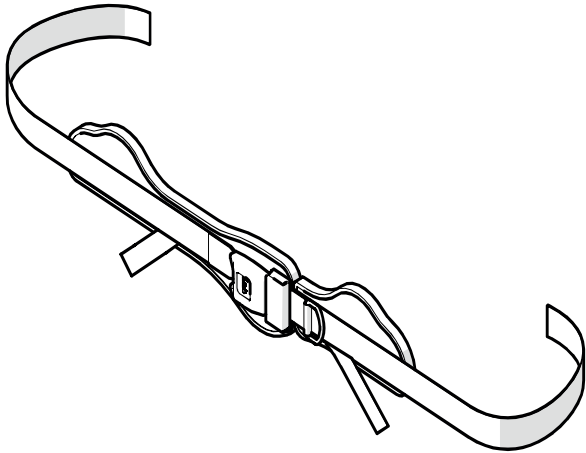

Lewis
SEATING SYSTEMS


Cam-buckles

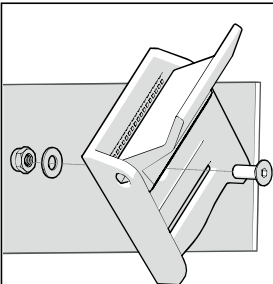

Gebruik de bandhouderplaten (indien besteld) of gaten en sleuven in het rolstoelframe voor de bevestiging van de Cam-buckles. De schroeven en bouten zijn meegeleverd

Afstellen Cam-buckle

1. Haal de banden door de Cam-buckles en stel de gewenste lengte in
2. Sluit vervolgens de Cam-buckles

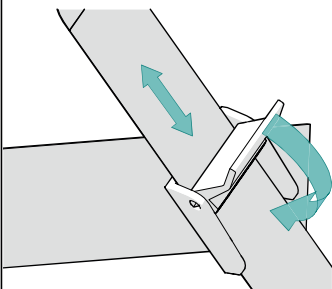


Kies een geschikte bevestiging voor de band:

- Gebruik vanwege verstelgemak de **Cam-buckles**.
- Is dit niet mogelijk gebruik dan de meegeleverde **Tri-glides**.


Positie van de banden

Bevestig de heupbanden (1) achter en onder de billen in een hoek van ongeveer 45°.

Bevestig de extra heupbanden (2) voor de heupbanden (1) in een verticale positie.

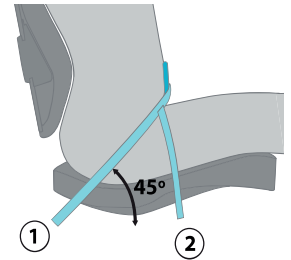


Tri-glide

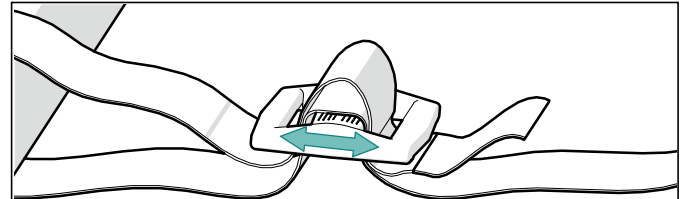


Haal de band volgens de afbeelding door de Tri-glide. Door het losse eind vast te houden en de Tri-glide van je af te schuiven wordt de band verkort.

Voorkom verschuiven door het band-einde terug door de Tri-glide te trekken.

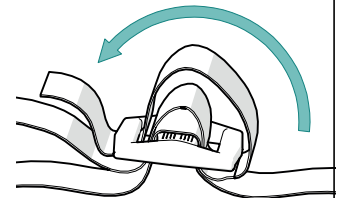


Fijnafstellen van de heupgordel

Trek de heupbanden stevig aan voor een optimale ondersteuning, veiligheid en comfort. De gordel is correct aangebracht wanneer men twee vingers tussen de gordel en het lichaam van de cliënt kan steken.

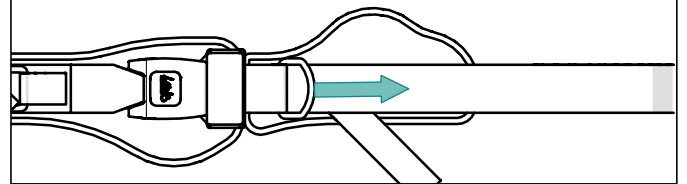

Banden verkorten

1. Knip de overbodige bandlengte af met een schaar.
2. Werk het knipvlak af met een hittebron om rafelen te voorkomen.

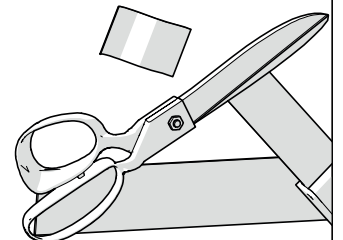

Dit product is niet bedoeld als veiligheidsgordel voor inzittende in een bewegend voertuig



Lees de opdruk op de heupgordel voor wasinstructies.



Deze instructie is ook te vinden op onze website.